



LatchAssist[®] Nipple Everter

For best results

Have your baby positioned for breastfeeding and then use LatchAssist[®] nipple everter. This will enable your baby to latch onto your breast as soon as your nipple is extended. The LatchAssist[®] nipple everter comes in two sizes so you can choose the right fit for you. A case for hygienic storage and on-the-go use is also included.

Indications for use


To help the correction of inverted or flattened nipples of the postpartum lactating mother, by everting the nipple, allowing an infant to latch.

Sanitizing before first use

We recommend sanitizing the LatchAssist[®] prior to first use and regularly as needed during use. The LatchAssist[®] can be sanitized by disassembling and boiling all parts in water for five minutes. Please be sure that no parts or attachments touch the bottom or the sides of the pan as this could cause them to melt.

Directions for use

- Always wash and dry hands thoroughly with soap and water before handling the LatchAssist[®]
- Select the LatchAssist[®] flange size that is most comfortable for you – either the 19mm or 24mm
- How do you know which size is the best fit? If your nipple rubs along the flange tunnel, it's too small. If there is too much room around the nipple in the flange, it's too large.
- Using a clean LatchAssist[®], gently squeeze the bulb and place the shield over and around your nipple

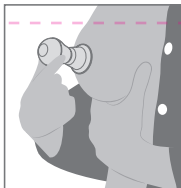

- Lightly press the shield down against the skin to ensure an airtight seal
- Slowly release the bulb for the desired pressure
- Repeat gently until your nipple is extended and the baby can easily latch onto the breast
- To remove, squeeze bulb and gently pull away from breast
- After use, discard any milk that may have collected in the bulb, then wash, rinse and air dry

Cleaning after use

After each use, rinse all the LatchAssist[®] parts with cold water immediately.

LatchAssist[®] may be washed in a dish washer.

If washing by hand:

- Place the parts in a clean wash basin used only for washing infant feeding equipment. Do not place the parts directly in the sink, because germs in sinks or drains could contaminate the parts.
- Hand wash the parts using warm soapy water.
- Rinse the parts with running clean, warm water, or by submerging in fresh water in a separate basin that is used only for cleaning infant feeding items.
- Place the parts on a clean, unused dish towel or paper towel in an area protected from dirt and dust. Do not use a dish towel to rub or pat items dry. Allow the parts to dry completely before assembly and use.
- Once the parts are dry, they can be stored in the clean case.
- Clean the wash basin and the nipple brush after each use following the manufacturers recommendation for cleaning. Rinse them well and allow them to air-dry after each use.

Distributed by:

Lansinoh Laboratories, Inc. Alexandria, VA 22314, USA
+1 800-292-4794 | Lansinoh.com

Made in Malaysia

Lansinoh[®] and LatchAssist[®] are registered trademarks of Lansinoh Laboratories, Inc. © 2024 Lansinoh Laboratories, Inc. All rights reserved.

LT70170IF1123



Evertidor de pezón LatchAssist®

Para obtener los mejores resultados

Posicione a su bebé para el amamantamiento y, luego, use el evertidor de pezón LatchAssist®. Esto permitirá que su bebé se prenda a su pecho tan pronto como su pezón esté extendido. El evertidor de pezón LatchAssist® viene en dos tamaños, para que pueda elegir el mejor calce para usted. También incluye un estuche para mantenerlo limpio cuando lo guarda y poder usarlo mientras está fuera de casa.

Indicaciones de uso


Para ayudar a corregir los pezones invertidos o aplanados de la madre que amamanta en el período posparto, evirtiendo el pezón para permitir que el bebé se prenda al pecho.

Desinfección antes del primer uso

Recomendamos desinfectar el LatchAssist® antes de usarlo por primera vez y, regularmente durante el uso, según sea necesario. El LatchAssist® puede desinfectarse desarmando e hirviendo todas las piezas en agua durante cinco minutos. Asegúrese de que ninguna de las partes ni los accesorios toquen el fondo o los lados de la cacerola, ya que podrían derretirse.

Instrucciones de uso

- Siempre lávese las manos con agua y jabón, y séquese bien antes de tocar el LatchAssist®.
- Seleccione el tamaño de copa de succión del LatchAssist® que le resulte más cómodo: puede ser de 19 mm o de 24 mm.
- ¿Cómo saber qué tamaño calza mejor? Si su pezón raspa a lo largo del túnel de la copa de succión, es demasiado pequeña. Si hay

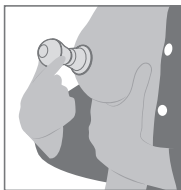

demasiado espacio alrededor del pezón en la copa de succión, es demasiado grande.

- Con un LatchAssist® limpio, apriete suavemente la pera y colóquese el protector sobre el pezón y alrededor de él.
- Presione suavemente el protector hacia abajo, contra la piel, para asegurarse de establecer un sello hermético.
- Suelte suavemente la pera para obtener la presión deseada.
- Repita la operación suavemente hasta que su pezón quede extendido y el bebé se pueda prender fácilmente al pecho.
- Para retirar el LatchAssist®, apriete la pera y tire suavemente de él para alejarlo del pecho.
- Después de usar el producto, deseche la leche que pueda haberse acumulado en la pera y; luego, lávelo; enjuáguelo y déjelo secar al aire.

Limpieza después del uso

Enjuague todas las piezas del LatchAssist® con agua fría inmediatamente después de cada uso.

El LatchAssist® puede lavarse en el lavavajillas.

Si lo lava a mano:

- Coloque las piezas en una palangana limpia que solo se utilice para lavar los equipos de alimentación del bebé. No las coloque directamente en el fregadero ya que los gérmenes que hay en los fregaderos o los drenajes podrían contaminar las piezas.
- Lave las piezas con agua jabonosa tibia.
- Enjuague las piezas con agua de grifo limpia y tibia o sumergiéndolas en agua limpia, en otra palangana que solo se use para limpiar los elementos de alimentación del bebé.
- Coloque las piezas sobre una toalla de cocina limpia, sin uso, o sobre una toalla de papel, en una zona resguardada de la suciedad y el polvo. No use una toalla de cocina para secar las piezas frotándolas ni dando golpecitos. Deje que las piezas se sequen por completo antes de ensamblarlas y usarlas.
- Una vez secas, las piezas pueden guardarse en el estuche limpio.
- Limpie la palangana y el cepillo para tetinas después de cada uso según la recomendación de limpieza de los fabricantes. Enjuáguelos bien y déjelos secar al aire después de cada uso.